


Venenstripper

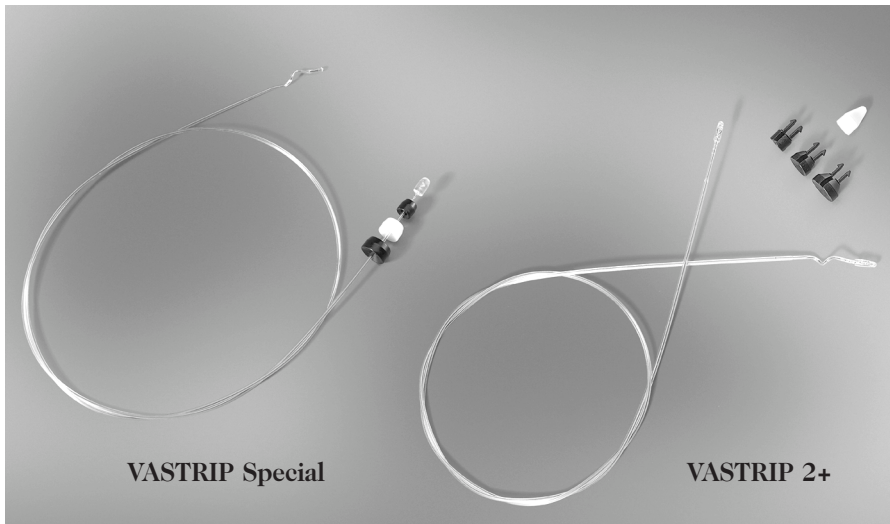

VASTRIP Special

VASTRIP 2+

Millionenfach haben sich die Venenstripper VASTRIP Special und VASTRIP 2+ zum 1-Patienten-Gebrauch bewährt.

VASTRIP 2+ bietet die optimale Lösung für alle Strippingtechniken:

- distale oder proximale Einführung der Sonde
- antegrades oder retrogrades Stripping
- konventionelles oder invagierendes Stripping, mit oder ohne Schleppfaden.

VASTRIP Special ist durch den 6-mm-Dissektionskopf auch für kleine Venenkaliber geeignet.

Bei beiden Modellen erleichtert der ergonomisch geformte Handgriff die Handhabung.


- ▶ **Durchgehende Metallseele**
 - gibt hohe Zugfestigkeit
 - erhöht die Führungsstabilität

- ▶ **Glatte Sondenoberfläche**
 - gleitet leicht in der Vene
 - erleichtert das Abstreifen der Vene zur Überprüfung der Perforansabgänge


- ▶ **Spiralförmiges Sondenende**
 - ermöglicht Richtungsänderung der Sondenspitze durch Drehen der Sonde
 - kann so die Anzahl der Inzisionen minimieren

- ▶ **1-Patienten-Instrument**
 - gewährleistet immer gleichbleibende Qualität ohne Knicke von vorherigen Operationen
 - erspart Zeit und erleichtert die Arbeit

VASTRIP 2+

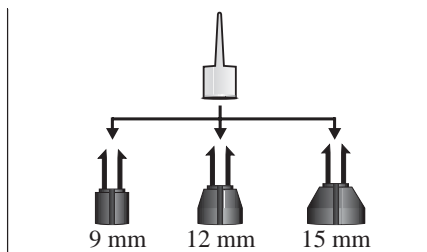


Dissektionsköpfe

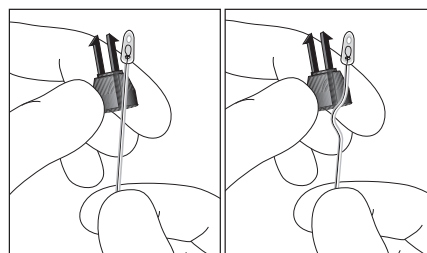

Gerades und spiralförmiges Sondenende

VASTRIP 2+ und VASTRIP Special

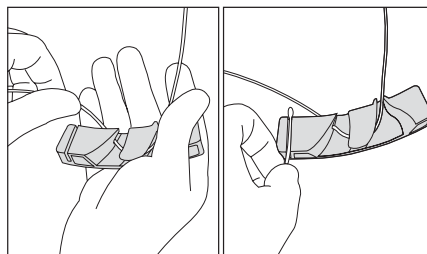

Leicht bewegbarer Handgriff



Verpackung mit großem Wickelradius

Bestellinformationen

Artikel	Stück/VE	Kat.-Nr.
VASTRIP 2+ Venenstripper mit beidseitig nachträglich aufsteckbaren Sondenköpfen (9, 12 und 15 mm)	10	67321
VASTRIP Special Venenstripper mit 6-, 9-, 12- und 15-mm-Sondenköpfen	10	67322



Wohlenbergstraße 5 Tel.: +49 (0)511-89 95 97 71
D-30179 Hannover Fax: +49 (0)511-89 95 97 74

www.medicalis.de